

# TOUCH Handsender



**Bedienungsanleitung**

Version: 1.0

Internet:

[www.telecaresystems.at](http://www.telecaresystems.at)

© TeleCare Systems & Communication GmbH

Dieses Handbuch wurde mit größter Sorgfalt erstellt und inhaltlich auf Richtigkeit geprüft. Für eventuell fehlerhafte oder unvollständige Angaben kann jedoch keine Haftung übernommen werden.

Alle Rechte an dieser Dokumentation, insbesondere das Recht zur Reproduktion und Verbreitung, Änderung oder Übersetzung sind ohne schriftliche Genehmigung nicht gestattet. Auch die Verbreitung über elektronische Medien ist ohne vorherige Zustimmung durch die TeleCare Systems & Communication GmbH nicht gestattet.

Inhalte des Handbuches können ohne weitere Ankündigung geändert werden. Ebenso sind technische Änderungen vorbehalten.

## Inhalt

<b>1. Allgemein</b> .....	<b>4</b>
<b>2. Montage des Zubehörs</b> .....	<b>4</b>
2.1. Halstragevariante.....	4
2.2. Armvariante .....	5
2.3. Gürtelclip .....	5
<b>3. Funk-ID</b> .....	<b>6</b>
<b>4. Alarmtypen</b> .....	<b>6</b>
4.1. Notruf.....	6
4.2. Batterie leer .....	6
4.3. Funkstreckenfehler .....	6
<b>5. Wartung</b> .....	<b>6</b>
<b>6. Entsorgung</b> .....	<b>7</b>
<b>7. Technische Daten</b> .....	<b>7</b>


## 1. Allgemein

Der Handsender TOUCH kann als Armband, am Gürtel oder um den Hals getragen werden, um jederzeit im Umkreis des Notrufgerätes einen Alarm auslösen zu können.

## 2. Montage des Zubehörs

### 2.1. Halstragevariante


Der Handsender TOUCH wird unter anderem mit einer Vorrichtung zum Tragen um den Hals geliefert. Legen Sie hierfür die Halstragevariante in eine der Führungen auf der Rückseite des Handsenders und schieben Sie dann den Clip für die Befestigung dieser in die dafür vorgesehene Führung ein.

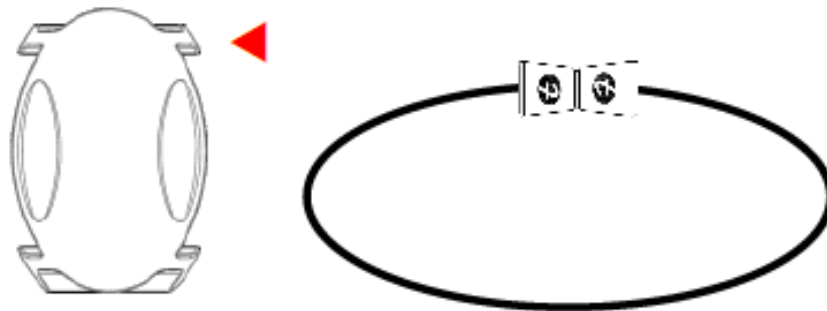

**Hinweis:** Die kürzere Seite auf der die Halstragevariante liegen soll, ist in der Abbildung oben rot markiert.


## 2.2. Armvariante

Fädeln Sie das Armband mit der Profilseite nach oben durch die Vorrichtung. Das Armband so justieren dass die Ausnehmung (gelber Pfeil) auf der Erhöhung des Clip (gelber Kreis) liegt. Drücken Sie dann noch den Verschluss wie abgebildet durch das Armband.

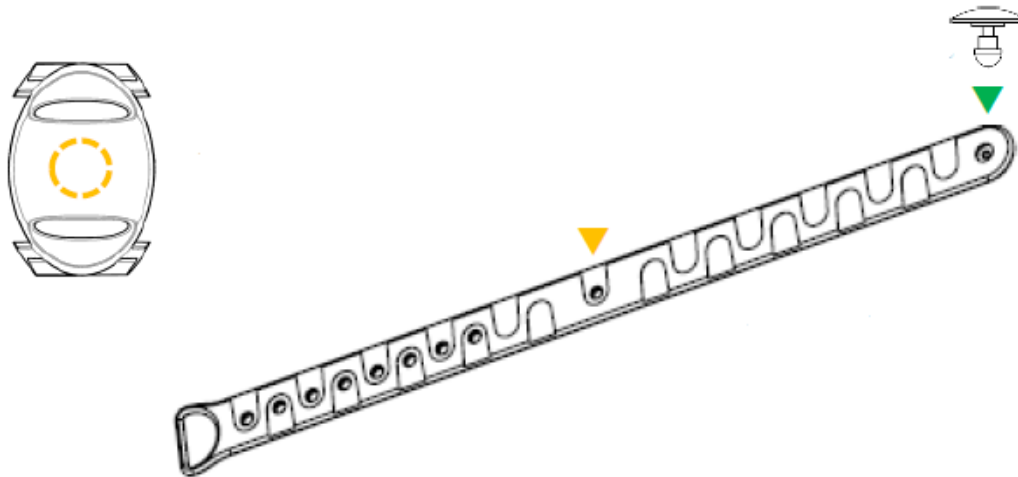


## 2.3. Gürtelclip

TOUCH auf den Gürtelclip schieben bis dieser einrastet. Der Saugnapf wird an dem Gürtelclip befestigt um diesen auf glatten Oberflächen verwenden zu können.

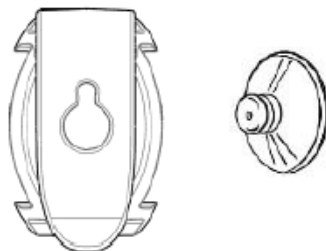

### 3. Funk-ID

TOUCH ist mit den Geräten von NEAT kompatibel (NOVO / NEO / TREX 2G oder D-Server). Die Funk-ID ist ein 4-stelliger Code, welcher auf der Rückseite aufgedruckt ist.

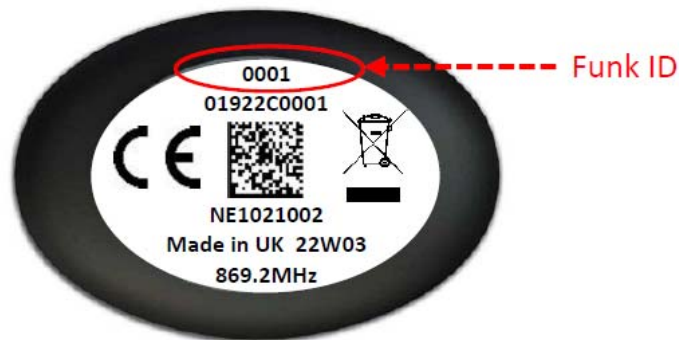

### 4. Alarmtypen

Der Handsender TOUCH unterstützt standardmässig folgende Alarmtypen:

#### 4.1. Notruf

Ein Notruf wird durch Betätigen der Notruftaste ausgelöst. Die Taste leuchtet rot um die Übertragung des Alarms zu bestätigen und leuchtet grün als Bestätigung, dass der Empfänger die Übertragung empfangen hat.

#### 4.2. Batterie leer

Eine leere Batterie wird automatisch an das Notrufgerät übertragen. Nach Empfang der Batteriemeldung sollte der Handsender zeitnah (innerhalb von 30 Tagen) ausgetauscht werden.

#### 4.3. Funkstreckenfehler

NOVO/NEO können die Funkstrecke der programmierten Sender überwachen und so einen Defekt oder Verlust des Senders melden. Kann ein NOVO/NEO den Funkstreckentest nicht empfangen wird automatisch ein Funkstreckenfehler übertragen. TOUCH sendet alle 9 Stunden einen Testalarm an das Notrufgerät.

### 5. Wartung

Testen Sie die Funktion des Handsenders regelmäßig (1x im Monat wird empfohlen). Reinigen Sie den Handsender nur mit einem feuchten Tuch und verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel.

## 6. Entsorgung

Elektroschrott darf nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.

## 7. Technische Daten

Abmessungen:	45mm x 30mm x 14mm (HxBxT)
Gewicht:	12 g (ohne Zubehör)
Norm	EN 50134-2:2017
Batterielebensdauer	5 Jahre (durchschnittlich)
Funkfrequenz	869.2125MHz Class1.5
Temperaturbereich	-10C bis +55C
Weiteres	Wasserdicht nach Norm IP68

TeleCare Systems & Communication GmbH

Ricoweg 14/2

2351 Wiener Neudorf

Österreich

Telefon: +43 2236 90301 0

Email: [office@telecaresystems.at](mailto:office@telecaresystems.at)

Web: [www.telecaresystems.at](http://www.telecaresystems.at)